

Démarrez en toute confiance. Démarrez avec **FLOWASSIST**.



Encore plus facile à utiliser

Pas de découpe supplémentaire des poches



Amélioration des caractéristiques du produit




Plus discret

Épaisseur de l'anneau de protection cutanée réduite à 2 mm

Comment ça fonctionne

FLOWASSIST, un composant flexible et non absorbant de l'anneau de protection cutanée, qui protège la peau et l'adhésif d'une absorption et d'une érosion excessives. Le canal FLOWASSIST dirige l'écoulement vers la poche de stomie afin **d'éviter les fuites et en protégeant mieux la peau**.

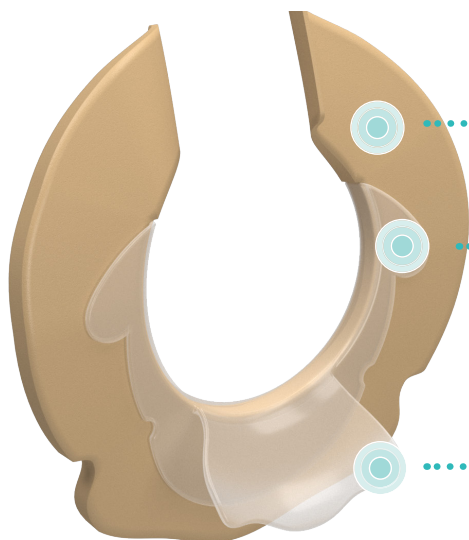

Hydrocolloïde divisé et moulable

Pour un ajustement précis, l'anneau de protection cutanée ouvert vers le haut peut être modelé.

FLOWASSIST

Le composant non absorbant protège la peau et l'adhésif d'une absorption et d'une érosion excessives.

FLOWASSIST-Canal

Dirige l'évacuation de la stomie loin de la peau, directement dans la poche.

AVANTAGES FLOWASSIST



- ✓ Protection améliorée contre les fuites
- ✓ Protection hydrocolloïde pour une durée de port prolongée
- ✓ Amélioration de la santé cutanée
- ✓ Sécurité et confort de premier choix

FLOWASSIST, conçu pour prévenir les irritations cutanées dans tous les types de stomies.

Efficacité prouvée dans les soins péristomaux



Etudes cliniques



Les études cliniques sur FLOWASSIST montrent toutes des améliorations significatives **de la santé cutanée péristomiale**, **une durée de port plus longue**, et des **expériences positives des utilisateurs**.




« Le FLOWASSIST a été un véritable **Game-Changer**. Pour chaque patient chez qui je l'ai utilisé, le FLOWASSIST a apporté un changement décisif. Maintenant, nous l'avons en stock à l'hôpital ».

Lisa, infirmière spécialisée dans les plaies, les stomies et l'incontinence (WOC), USA


GUIDE D'UTILISATION

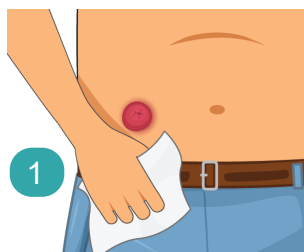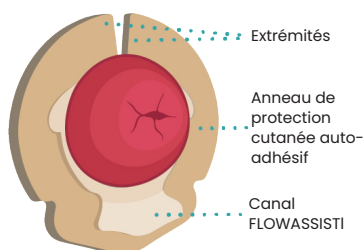


Lavez-vous les mains et assurez-vous que la peau autour de votre stomie est propre et sèche. Chauffez l'anneau de protection cutanée dans vos mains pendant 30 secondes et retirez le film protecteur.

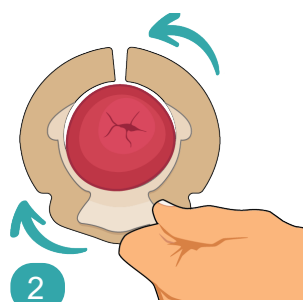


Positionnez le canal FLOWASSIST sous la stomie ou tournez-le de manière à ce qu'il corresponde à l'ouverture de la stomie. Vous pouvez tenir le canal pour faciliter le positionnement.

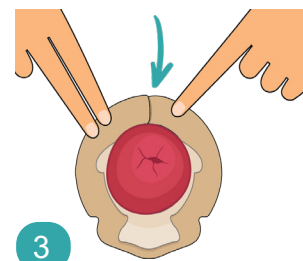

Placez les extrémités de l'anneau de protection autour de la stomie. Veillez à ce que les extrémités se chevauchent.

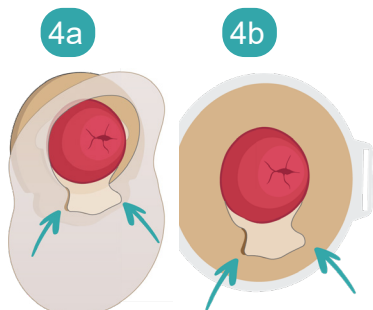

Préparez l'ouverture de la poche de stomie conformément aux instructions du fabricant. Assurez-vous que le canal FLOWASSIST se trouve entièrement dans l'ouverture de la poche. Tirez ensuite la poche en une pièce (figure 4a) ou le système de poche en deux pièces (figure 4b) aussi loin que possible sous le canal FLOWASSIST.

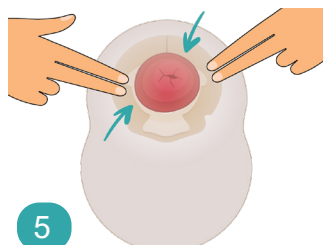

Exercez une légère pression sur le sachet afin d'obtenir un collage sûr.



Dans la mesure du possible, vérifiez que l'anneau de protection de la peau ne soit pas visible. Si vous constatez que c'est le cas, essayez d'ajuster la poche de manière à ce qu'elle recouvre cette zone.



Vidéo d'instructions

Description	No article	Dimension de la stomie (mm)
Ostoform Flowassist anneau de protection cutanée S	OFA-S-BX10	15 – 23 mm
Ostoform Flowassist anneau de protection cutanée M	OFA-M-BX10	23 – 30 mm
Ostoform Flowassist anneau de protection cutanée L	OFA-L-BX10	30 – 40 mm

Distributeur en Suisse



Mediq Suisse AG | Rosengartenstrasse 25 | 8608 Bubikon
Tél 052 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch | www.mediqsuisse.ch



www.ostoform.com