

FLOWASSIST Système de stomie 2 pièces




Comment ça marche

Le composant **FLOWASSIST** non absorbant protège la peau et l'adhésif d'une absorption et d'une érosion excessives.

Le **FLOWASSIST-Canal** dirige l'évacuation de la stomie loin de la peau, directement dans la poche.

La plaque de base peut être tournée et positionnée de manière à ce que le **FLOWASSIST-Canal** corresponde parfaitement à l'ouverture de la stomie.

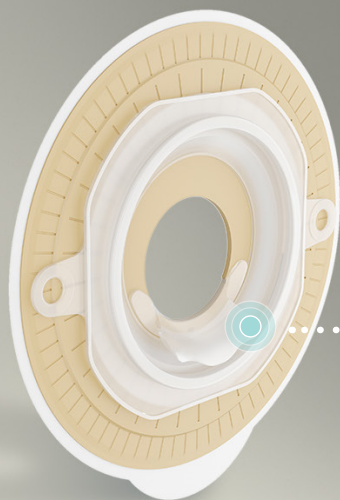

Avantages FLOWASSIST



- ✓ Protection améliorée contre les fuites
- ✓ Protection hydrocolloïde pour une durée de port prolongée
- ✓ Amélioration de la santé cutanée
- ✓ Sécurité et confort de premier choix

Anneau flexible

Permet une fixation plus facile de la poche de stomie tout en exerçant moins de pression sur l'abdomen. Les coins coudés assurent un maintien sûr et facilitent le retrait.

Rainures radiales

La plaque de base s'adapte ainsi parfaitement à la peau autour de la stomie.



Tissu moderne, tissé


Discret, respirant et imperméable pour un confort quotidien.

Design anatomique

S'adapte aux formes corporelles individuelles, pour un maintien sûr, avec une surface silencieuse.

Des languettes de fixation pour la ceinture sont présentes sur tous les types de poches. Des plaques de base convexes élargissent la gamme pour une sécurité supplémentaire.

Les poches de stomie suivantes sont disponibles:

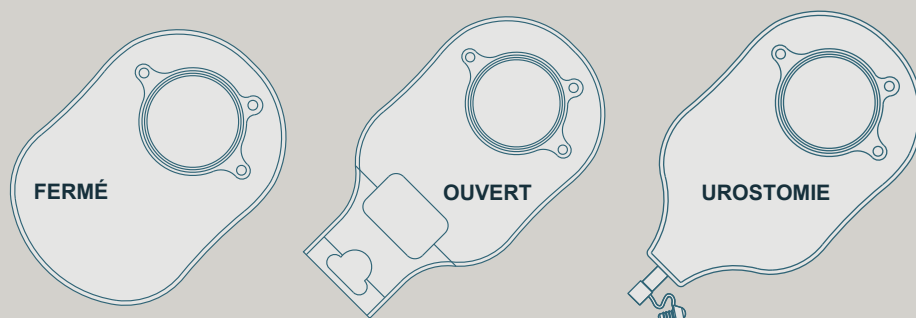

Les poches de stomie fermées et ouvertes disposent d'une fenêtre de visualisation intégrée.

Les **poches fermées** sont équipées d'un filtre à charbon actif qui désodorise les gaz tout en leur permettant de s'échapper librement.

Les **sachets ouverts** sont équipés de la technologie de filtre Moisture Protect Composition (MPC) – une couche de protection supplémentaire qui protège le filtre à charbon contre l'absorption de liquides.

Les **poches de urostomie** sont dotées d'une fermeture souple pour un vidage facile.

Tableau des tailles

Description du produit	Taille	No. d'article	Découpe (mm)
Ostoform FLOWASSIST Plaque de base plan	SMALL	OFA-FB57-S	19 – 25 mm
	MEDIUM	OFA-FB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-FB57-L	32 – 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Plaque de base konvex	SMALL	OFA-CB57-S	19 – 25 mm
	MEDIUM	OFA-CB57-M	25 – 32 mm
	LARGE	OFA-CB57-L	32 – 40 mm
Ostoform FLOWASSIST Poche ouvert	•	OFA-DP57	•
Ostoform FLOWASSIST Poche d'urostomie	•	OFA-UP57	•
Ostoform FLOWASSIST Poche fermé	•	OFA-CP57	•

Distribution Suisse:



at the heart of healthcare



www.ostoform.com

Mediq Suisse AG | Tél 0800 810 808 | Fax 044 986 21 65 | homecare@mediq-suisse.ch | www.mediqsuisse.ch